

DreamStar Duo // Duo ST

Des appareils à 2 niveaux de pression simples et complets destinés à des patients non dépendants (SAOS ou IRC)

T R A I T E M E N T




- ▷ Design très compact
- ▷ Humidificateur intégré
- ▷ Cordon d'alimentation standard
- ▷ Transport aisé
- ▷ Silencieuse
- ▷ Logiciels permettant une bonne adaptation de la machine au patient

DreamStar Duo & **DreamStar Duo ST** possèdent tous les atouts permettant au médecin une adaptation efficace de l'appareil ainsi qu'une bonne observance du patient.

DreamStar Duo // Duo ST

Des fonctions avancées brevetées (Flow-Sens, Calibration Spécifique) permettent au praticien de s'assurer que l'appareil s'adapte correctement au patient (déclenchement des cycles, correction des fuites) et aux composants du circuit pneumatique (type de tuyau, masque).

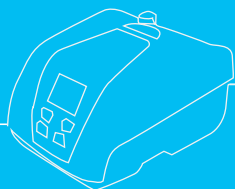

DreamStar Duo et **Duo ST** fonctionnent avec OxyLink, qui permet au clinicien d'évaluer l'efficacité du traitement en liant les données d'oxymétrie aux événements respiratoires et aux données machine. Toutes ces données peuvent également être analysées grâce au logiciel DreamStar Analyze sur les 365 derniers jours.

DreamStar Duo

DreamStar Duo ST

DreamStar Duo


L'algorithme FlowSens ajuste automatiquement les seuils de triggers et permet à la machine de répondre instantanément aux changements de la demande ventilatoire du patient. De plus, il détecte et compense seul les fuites.

Le contrôle de l'humidification et de la condensation est assuré par les fonctions «Water Control and Humid Control».

DreamStar Duo ST

Dotée des mêmes caractéristiques et fonctions que **DreamStar Duo**, **DreamStar Duo ST** offre en plus le réglage d'une fréquence de sauvegarde et d'un rapport I / E.

À l'aide de l'écran **ADAPT**, le médecin peut visualiser sur la machine, les paramètres du traitement (volume courant, débit respiratoire, fuite moyenne, temps inspiratoire, pressions) et agir instantanément sur les réglages.

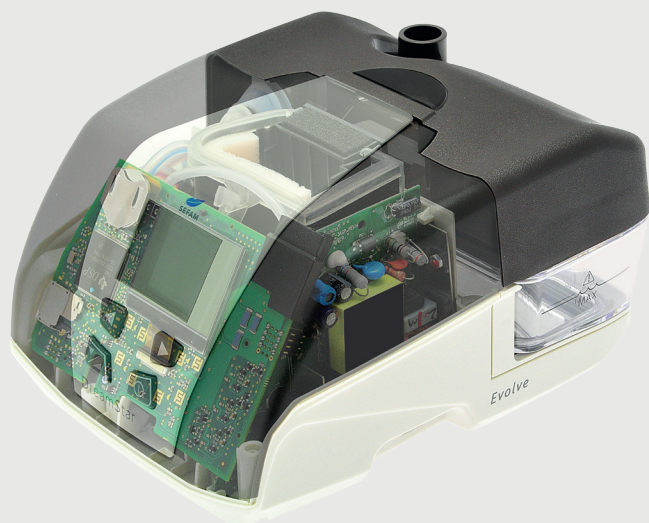

3	→	B
Insp	Vt = 0,1 L	
F = 10 BPM		
P = 7.5 cmH2O	L = 20 LPM	
	Ti = 1,9 S	
	15:38	

Pour plus d'information :



Service Clients

T. +33 (0)3 83 44 77 40
F. +33 (0)3 83 44 99 87
customerservice@sefam-medical.com

www.sefam-medical.com

DreamStar Duo et Duo ST sont destinés à la ventilation non-invasive de patients de plus de 30kg, souffrant d'insuffisance respiratoire ou de Syndrome d'Apnées du Sommeil mais non dépendants d'une assistance respiratoire.

Les appareils présentés sont des dispositifs médicaux. Il s'agit de produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ces appareils doivent être utilisés sur prescription médicale et font l'objet d'un remboursement par les organismes d'assurance maladie dans certaines conditions : consulter la LPPR.

Se référer au manuel d'utilisation et/ou au manuel clinique du dispositif pour toute information concernant l'usage préconisé, les contre-indications, les effets secondaires et pour une utilisation correcte, sûre et efficace.



Fabricant : SEFAM - 144 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - FRANCE
Site de fabrication : SEFAM - 10 allée Pelletier Doisy - 54600 Villers-Lès-Nancy - FRANCE

CE 0459

BR0147-01 / 2017

Sefam
HEALTH TECH